

SYLK

Das natürliche Gleitgel aus dem Saft der Kiwiplanze hat sich seit Jahrzehnten als rein pflanzliches und daher gut verträgliches Gleitmittel bewährt. Sylk® ist frei von tierischen Bestandteilen, Hormonen, Silikonen und Parabenen.

Gebrauchsanweisung

Vor der Anwendung die Gebrauchsanweisung lesen.

Zusammensetzung

Gereinigtes Wasser, Natriumzitrat, Zitronensäure, Kaliumsorbit, Grapefruitkernextrakt, Glycerin, Kiwifruchtextract, Xanthan Gum

Indikationen


Sylk® dient der Verbesserung der Gleitfähigkeit während des Geschlechtsverkehrs und möglichen Steigerung des Lustempfindens. Dadurch werden Fissuren vermieden und Infektionen treten seltener auf. Es ist auch auf Kondomen, zum Einführen von Tampons, Thermometern und Hilfsmitteln zur sexuellen Stimulation geeignet.

Kontraindikationen
Known hypersensitivity to the product. In cases of vaginal infection, consult your doctor before using the product.

Directions
The amount individually needed is applied directly to the skin to the desired site with a finger. Because of its mildly acid pH of 4.4 – 4.7, Sylk® should not be used when trying to conceive. In this phase, we recommend using Prefert® Vaginal Gel instead to optimize fertility.

This product is water-soluble, odorless and non-greasy and therefore it is compatible with condoms made of natural rubber latex, polyurethane and polyisoprene. It has no contraceptive effect. Sylk® is suitable for vaginal use.

If the packaging is damaged such that the tube is no longer intact, do not use the product. Keep this medical device out of reach of children.

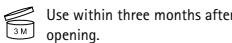

Use within three months after opening.

Side effects
To date there have been no reports of side effects.

Storage
 Do not store over 25 °C.

Nach Anbruch innerhalb von drei Monaten aufzubrauchen.

Nebenwirkungen


Bislang liegen keine Meldungen über Nebenwirkungen vor.

Lagerung

Nicht über 25 °C lagern.

Herstellung und Vertrieb

KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Tel: +49 6105 - 203720
service@medintim.de
www.medintim.de

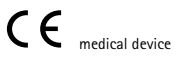

medical device

Medizinprodukt

SYLK

The natural lubricant from the juice of the kiwi plant has been proven for decades as a purely plant-based and thus well-tolerated lubricant. Sylk® is free of animal components, hormones, silicones and parabens.

Instructions for use

Read the instructions for use prior to application.

Mode d'emploi

Lire la notice avant l'utilisation.

Composition

Purified water, sodium citrate, citric acid,

potassium sorbate, grapefruit seed extract,

glycerin, kiwi fruit extract, xanthan gum

Indications

Sylk® is used to improve lubrication during sexual intercourse and possibly increase pleasurable sensations. As a result, fissures are avoided and infections occur less often. It is also suitable for use on condoms, for inserting tampons, thermometers and aids for sexual stimulation.

Contraindications


Known hypersensitivity to the product. In cases of vaginal infection, consult your doctor before using the product.

Directions

The amount individually needed is applied directly to the skin to the desired site with a finger. Because of its mildly acid pH of 4.4 – 4.7, Sylk® should not be used when trying to conceive. In this phase, we recommend using Prefert® Vaginal Gel instead to optimize fertility.

This product is water-soluble, odorless and non-greasy and therefore it is compatible with condoms made of natural rubber latex, polyurethane and polyisoprene. It has no contraceptive effect. Sylk® is suitable for vaginal use.

If the packaging is damaged such that the tube is no longer intact, do not use the product. Keep this medical device out of reach of children.

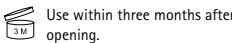

Use within three months after opening.

Side effects
To date there have been no reports of side effects.

Storage
 Do not store over 25 °C.

Nach Anbruch innerhalb von drei Monaten aufzubrauchen.

Nebenwirkungen

Bislang liegen keine Meldungen über Nebenwirkungen vor.

Lagerung

Nicht über 25 °C lagern.

Herstellung und Vertrieb

KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
Tel: +49 6105 - 203720
service@medintim.de
www.medintim.de

Medizinprodukt

SYLK

The natural lubricant from the juice of the kiwi plant has been proven for decades as a purely plant-based and thus well-tolerated lubricant. Sylk® is free of animal components, hormones, silicones and parabens.

Instructions for use

Read the instructions for use prior to application.

Mode d'emploi

Lire la notice avant l'utilisation.

Composition

Eau purifiée, citrate de sodium, acide citrique, sorbate de potassium, extrait de pépins de pamplemousse, glycérine, extrait de kiwi, gomme xanthane.

Indications

Sylk® est destiné à améliorer la lubrification pendant les rapports sexuels et à éventuellement augmenter le plaisir. Ce qui permet d'éviter des fissures et de réduire l'apparition d'infections. Convient également aux préservatifs, à l'introduction de tampons, de thermomètres et d'accessoires de stimulation sexuelle.

Contraindications

Hypersensibilité connue au produit. En cas d'infection vaginale, consulter votre médecin avant d'utiliser le produit.

Directions

Hypersensibilité connue au produit. En cas d'infection vaginale, consulter votre médecin avant d'utiliser le produit.

Utilisation

Appliquer la quantité individuelle nécessaire directement sur la peau ou sur la zone souhaitée à l'aide des doigts. En raison de son pH légèrement acide (4,4 à 4,7), Sylk® doit pas être utilisé en cas de désir d'enfant. Nous recommandons par conséquent d'utiliser, pendant cette phase, le gel vaginal Prefert® pour augmenter la fertilité.

Ce produit, hydro soluble, sans odeur et non gras est donc toléré en utilisation avec des préservatifs en latex de caoutchouc naturel, en polyuréthane et en polyisoprène. Il ne possède pas de propriétés contraceptives. Sylk® convient à l'application vaginale.

Ne pas utiliser le produit si l'emballage présente des dommages qui nuisent à l'intégrité du tube. Dispositif médical à tenir hors de portée des enfants.

Une fois ouvert, utiliser avant trois mois.

Effets secondaires

Jusqu'à présent, aucun effet secondaire n'a été signalé.

Conservation

À conserver en dessous de 25 °C.

Fabrication et distribution
 KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Allemagne

Tel: +49 6105 - 203720
service@medintim.de
www.medintim.de

Dispositif médical

SYLK

Il gel lubrificante naturale ricavato dal succo della pianta di kiwi si è affermato da decenni come lubrificante completamente vegetale e, quindi, ben tollerato. Sylk® è privo di componenti di origine animale, ormoni, siliconi e parabeni.

Istruzioni per l'uso

Prima dell'impiego, leggere le istruzioni per l'uso.

Composizione

Acqua purificata, citrato di sodio, acido citrico, sorbato di potassio, estratto di semi di pompelmo, glicerina, estratto di kiwi, gomma xantana.

Indicazioni

Sylk® è destinato al miglioramento della scorevolezza durante i rapporti sessuali e al possibile aumento della percezione del piacere. In questo modo, si prevengono le fissurazioni e le infezioni compaiono più raramente. È adatto anche per l'applicazione sul preservativo, per l'introduzione di tamponi, termometri e ausili per la stimolazione sessuale.

Indicaciones

Sylk® contribuye a mejorar la lubricación durante las relaciones sexuales y a incrementar la sensación de placer. De este modo se evitan las fisuras y se reduce la aparición de infecções. Es apto también para su aplicación en el preservativo, y para la introducción de los tampones, el termómetro y los dispositivos para la estimulación sexual.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida al producto. En caso de infección vaginal, consultar al médico prima de utilizar el producto.

Comprobación

Aplicar la cantidad necesaria directamente sobre la piel o en la zona deseada con los dedos. Por su valor de pH ligeramente ácido de 4,4 a 4,7, Sylk® no debería usar en el caso de que se desee un embarazo. Para esta fase recomendamos el gel vaginal Prefert®, porque mejora la fertilidad.

Este producto es hidrosoluble, no tiene olor y no contiene grasa, por eso es compatible con los preservativos de látex de caucho natural, poliuretano y polisopreno. No tiene efecto anticonceptivo. Sylk® está indicado para la aplicación vaginal.

No use el producto si el envase presenta daños que afectan a la integridad del tubo. Mantener este producto sanitario alejado del alcance de los niños.

Una vez abierto, utilizar el producto en un plazo de tres meses.

Efectos secundarios

Hasta la fecha no se ha comunicado ningún efecto secundario.

Conservación

Conservare a temperatura non superiore ai 25 °C.

Produzione e distribuzione

KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Germania

Tel: +49 6105 - 203720
service@medintim.de
www.medintim.de

Dispositivo medico

SYLK

El lubricante natural a partir de la savia de la planta de kiwi viene demostrando su eficacia desde hace décadas como lubricante cien por cien vegetal y, por tanto, su buena tolerancia. Sylk® no contiene ingredientes de origen animal, hormonas, siliconas ni parabenos.

Modo de uso

Antes de utilizarlo leer las instrucciones de uso.

Composición

Agua purificada, citrato de sodio, ácido citrico, sorbato de potasio, extracto de semilla de pomelo, glicerina, extracto de kiwi, goma xantana

Indicaciones

Sylk® es destinado a mejorar la lubricación durante los encuentros sexuales y a aumentar la percepción del placer. De este modo se evitan las fisuras y se reduce la aparición de infecções. Es apto también para su aplicación en el preservativo, y para la introducción de los tampones, el termómetro y los dispositivos para la estimulación sexual.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida al producto. En caso de infección vaginal, consultar al médico prima de utilizar el producto.

Aplicación

Aplicar la cantidad necesaria directamente sobre la piel o en la zona deseada con los dedos. Dado su valor de pH ligeramente ácido de 4,4 a 4,7, Sylk® no debe usarse en el caso de que se desee un embarazo. Para esta fase recomendamos el gel vaginal Prefert®, porque mejora la fertilidad.

Este producto es hidrosoluble, no tiene olor y no contiene grasa, por eso es compatible con los preservativos de látex de caucho natural, poliuretano y polisopreno. No tiene efecto anticonceptivo. Sylk® está indicado para la aplicación vaginal.

No use el producto si el envase presenta daños que afectan a la integridad del tubo. Mantener este producto sanitario alejado del alcance de los niños.

Una vez abierto, utilizar el producto en un plazo de tres meses.

Efectos secundarios

Hasta la fecha no se ha comunicado ningún efecto secundario.

Almacenamiento

Conservar a temperatura superior a 25 °C.

Productie en distributie

KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Duitsland

Tel: +49 6105 - 203720
service@medintim.de
www.medintim.de

productos sanitarios

SYLK

De naturlijke glidgel, fremstillet af saften fra kiwiplanten, er et rent vegetabilsk glidemiddel og tåles dermed rigtig godt. Sylk® indeholder ingen animalske stoffer, hormoner eller silikone og heller intet paraben.

Gebruiksaanwijzing

Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing door.

Sammensætning

Gezuiverd vand, natriumcitrat, citronsyre, kaliumsorbit, grapefruitkerneekstrakt, glycerin, kiwifrugtekstrakt, xanthan gum

Indikationer

Sylk® har til formål at forbedre glidene under samleje og til muliggøring af sexlysten. Derved undgås fissurer, og infektioner forekommer sjeldnere. Midlet er også egnet til påføring på kondomer, til indføring af tamponer, termometer og hjælpemidler til sekuelær stimulation.

Kontraindikationer

Kendt hypersensitivitet til produktet. I tilfælde af en infektion i skeden skal du rådføre dig med din læge, før du bruger produktet.

Contra-indications

Bekendt overgevoeligheid voor het product. Indien overførsomhed over voor produktet. I tilfælde af en infektion i skeden skal du rådføre dig med din læge, før du bruger produktet.

Gebruik

Den individuelle nødvendige mængde påføres direkte på huden eller påføres med fingrer på det ønskede sted. Sylk® bør ikke anvendes, hvis man ønsker at blive gravid på grund af den noget sure pH-værdi på 4,4 til 4,7. I denne periode anbefaler vi derfor Prefert® vaginalgel for at optimere frugtbartigheden.

Dette produkt er vandoploseligt, lugtneutral og fedtfrit og tåles derfor godt af kondomer, fremstillet af naturligummiatex, polyurethan og polyisopren. Det har ingen svangerskabsforebyggende virkning. Sylk® er egnet til vaginal brug.

Såfremt pakningen er beskadiget og som følge heraf en beskadiget tube, må produktet ikke anvendes. Dette medicinske produkt skal opbevares utilgængeligt for børn.

Na opening binnen drie maanden opgebruiken.

Bivirkninger

Der foreligger hidtil ingen informationer om bivirkninger.

Opbevaring

Må ikke opbevares ved temperatur over 25 °C.

Produktion og salg

KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28

64546 Mörfelden-Walldorf, Tyskland
Tel: +49 6105 - 203720
service@medintim.de
www.medintim.de

medicinsk hulpmiddel

SYLK

Det naturlige glidegel, fremstillet af saften fra kiwiplanten, er et rent vegetabilisk glidemiddel og tåles dermed rigtig godt. Sylk® indeholder ingen animalske stoffer, hormoner eller silikone og heller intet paraben.

Brugsanvisning

Læs brugsanvisningen før brug.

Sammensætning

Renset vand, natriumcitrat, citronsyre, kaliumsorbit, grapefruitkerneekstrakt, glycerin, kiwifrugtekstrakt, xanthan gum

Indikationer

Sylk® har til formål at forbedre glidene under samleje og til muliggøring af sexlysten. Derved undgås fissurer, og infektioner forekommer sjeldnere. Midlet er også egnet til påføring på kondomer, til indføring af tamponer, termometer og hjælpemidler til sekuelær stimulation.

Kontraindikationer

Kendt hypersensitivitet til produktet. I tilfælde af en infektion i skeden skal du rådføre dig med din læge, før du bruger produktet.

Contra-indications

Bekendt overgevoeligheid voor het product. Indien overførsomhed over voor produktet. I tilfælde af en infektion i skeden skal du rådføre dig med din læge, før du bruger produktet.

Gebruik

Den individuelle nødvendige mængde påføres direkte på huden eller påføres med fingrer på det ønskede sted. Sylk® bør ikke anvendes, hvis man ønsker at blive gravid på grund af den noget sure pH-værdi på 4,4 til 4,7. I denne periode anbefaler vi derfor Prefert® vaginalgel for at optimere frugtbartigheden.

Dette produkt er vandoploseligt, lugtneutral og fedtfrit og tåles derfor godt af kondomer, fremstillet af naturligummiatex, polyurethan og polyisopren. Det har ingen svangerskabsforebyggende virkning. Sylk® er egnet til vaginal brug.

Såfremt pakningen er beskadiget og som følge heraf en beskadig

SYLK

Det naturliga glidmedlet av växtsaft från kiwiplanter är sedan årtionden beprövat som ett helt växtbaserat och säljes vär tolert glidmedel. Sylk® är fritt från animaliska beständsdelar, hormoner, silikoner och parabener.

Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen före användning.

Sammansättning

Renat vatten, natriumcitrat, citronsyrta, kaliumsorbat, grapefruktäkstrakt, glycerin, kiwifruktextrakt, xantangummi.

Indikationer

Sylk® är avsett att öka glidförmågan under samlag och eventuellt öka lustkänslan. Minskar risken för sprickor och för att infektorier uppstår. Lämpligt att använda med kondom, vid införande av tamponer, termometer och som hjälpmittel för sexuell stimulering.

Kontraindikationer

Känd överkänslighet mot produkten. Vid vaginal infektion ska du kontakta läkare innan du använder produkten.

Användning

Applicker den mängd som krävs direkt på huden eller med ett finger på önskat ställe. Sylk® ska på grund av ett något surt pH-värde på 4,4 – 4,7 inte användas vid önskan att bli gravid. Under fasen rekommenderar vi istället Prefert® Vaginalgel för att optimera fertiliteten.

Denna produkten är vattenlöslig, doftneutral och fettfri och kan säljes användas med kondomer i naturgummi, polyuretan och polisopren. Det har ingen preventivmedseffekt. Sylk® är avsett för vaginal användning.

Om förpackningen är skadad och detta kan ha påverkat tuben ska produkten inte användas. Denna medicintekniska produkt ska förvaras utom räckhåll för barn.

Används inom tre månader från öppnandet.

Biverkningar

I nuläget finns inga rapporter om biverkningar.

Förvaring

Förvaras vid högst 25 °C.

Tillverkare och distributör
KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Tyskland
Tel: +49 6105 - 203720
service@medintim.de
www.medintim.de

Medicinteknisk produkt

SYLK

Den naturliga glidegelen av saften fra kiwiplanter har vist seg som et rent vegetarisk og dermed godt tolerert glidmedlet. Sylk® er fri for dyrebestanddeler, hormoner, silikoner og parabener.

Bruksanvisning

Les bruksanvisningen før bruk.

Sammensætning

Renset vann, natriumcitrat, sitronsyre, kaliumsorbat, grapefruktäkstrakt, glycerin, kiwifruktextrakt, xantan-gummi.

Indikasjoner

Sylk® er beregnet til forbedring av glidning under samleie og mulig økning av lysfeleisen. Gjennom dette unngås sprekker, og infeksjoner opptrer sjeldner. Egner seg også til bruk på kondomer, til innføring av tamponer, termometre og hjelpmidler til seksuell stimulasjon.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet overfor produktet. I tilfelle en vaginal infeksjon rådfør lege før du bruker produktet.

Anvendelse

Den individuelt nødvendige mengden påføres direkte på huden eller ved bruk av en finger på ønsket sted. Sylk® skal på grunn av den litt sure pH-verdien på 4,4 – 4,7 ikke brukes hvis det er ønske om barn. I denne fasen anbefaler vi derfor Prefert® vaginalgel for å optimere fruktbarheten.

Dette produktet er vannlöslig, luktnøytralt og fettfritt og dermed kompatibelt med kondomer i naturgummi, polyuretan og polisopren. Det har ingen preventivmedseffekt. Sylk® er egnet til vaginal bruk.

Hvis pakningen oppviser skader som reduserer integriteten til tuben, ikke bruk produktet. Dette legemidlet skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Skal brukes innen tre måneder etter at pakningen er åpnet.

Biverkninger
Hittil foreligger ingen rapporter om biverkninger.

Oppbevaring

Må ikke lagres over 25 °C.

Produksjon og distribusjon

KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Tyskland
Tel: +49 6105 - 203720
service@medintim.de
www.medintim.de

medisinsk produkt

SYLK

Přirozený lubrikační gel ze šťávy kiwiowníku se již po staleti osvědčuje jako čistě rostlinný a proto dobré snášlivý lubrikační prostředek. Sylk® neobsahuje složky živočišného původu, hormony, silikony a parabeny.

Návod k použití

Před použitím si přečtěte návod k použití.

Složení

Čistěná voda, citrát sodný, kyselina citronová, sorbat, grapefruktjernékstrakt, glycerin, kiwifruktextrakt, xantan-gummi

Indikace

Sylk® slouží ke zlepšení kluznosti při polohy stuku a k případnému vystupňování pocitu rozkoše. Tím se zabrání vzniku fisur a infekcji se vyskytuje méně často. Hodí se také na kondomy, k zavádění tamponů, teploměrů a pomocných prostředků k sexuální stimulaci.

Kontraindikace

Známá precipitivní většina výrobku. V případě vaginální infekce se poradte s lékařem, než výrobek použijete.

Použití

Individuálně potřebné množství se nanáší přímo na pokožku nebo se pomocí prstu na den liet sur pH-verdien på 4,4 – 4,7 ikke brukes hvis det er ønske om barn. I denne fasen anbefaler vi derfor Prefert® vaginalgel for å optimere fruktbarheten.

Dette produktet er vannlöslig, luktnøytralt og fettfritt og dermed kompatibelt med kondomer i naturgummi, polyuretan og polisopren. Det har ingen preventivmedseffekt. Sylk® er egnet til vaginal bruk.

Hvis pakningen oppviser skader som reduserer integriteten til tuben, ikke bruk produktet. Dette legemidlet skal oppbevares utilgjengelig for barn.

Skal brukes innen tre måneder etter at pakningen er åpnet.

Biverkninger
Hittil foreligger ingen rapporter om biverkninger.

Oppbevaring

Må ikke lagres over 25 °C.

Produksjon og distribusjon

KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Tyskland
Tel: +49 6105 - 203720
service@medintim.de
www.medintim.de

zdravotnický prostředek

SYLK

Naturalny nawilżający żel intymny z soku kiwi który sprawdzi się od dziesięcioleci jako wyjątkowo łosiony i dlatego dobrze tolerowany nawilżający żel intymny. Żel Sylk® nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, hormonów, silikonów ani parabenów.

Instrukcja użycia

Pred użyciem należy przeczytać instrukcję użycia.

Skład

Woda oczyszczona, cytrynian sodu, kwas cytrynowy, sorbinian potasu, wyciąg z pestek grejpfruta, gliceryna, wyciąg z owoców kiwi, guma ksantanowa

Wskazania

Żel Sylk® jest przeznaczony do poprawy nawilżenia podczas stosunku płciowego i ewentualnego zwielkszania doczuciania przyjemności. Dzięki temu można uniknąć powstawania piekielnych, a zakażenia występują rzadziej. Nadaje się również do stosowania na prezerwatywy, do wprowadzania tamponów, termometrów i środków pomocniczych do stymulacji seksualnej.

Przeciwwskazania

Stwierdzona nadwrażliwość na produkt. W przypadku zakażenia pochwy należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem produktu.

Sposób użycia

Indywidualnie wymaganą ilość należy nanieść bezpośrednio na skórę lub palcem w prawidłowej w żądanej miejscowości. Ze względu na lekko kwaśną wartość pH 4,4 – 4,7 na koniec Sylk®, nie należy go używać w przypadku planowania ciąży. W tej fazie zalecamy z tego względu stosowanie żelu dopochwowego Prefert® w celu optymalizacji plodności.

Produkt jest rozpuszczalny w wodzie, ma neutralny zapach i nie zawiera tłuszczy. W związku z tym można go stosować z prezentacyjnymi wykorzystaniem z lateksu kauczuku naturalnego, poliuretanu i polisoprenu. Produkt nie ma działania antykoncepcyjnego. Sylk® jest przeznaczony do podania dopochwowego.

Jeśli opakowanie wykazuje uszkodzenia wpływające na integralność tuby, nie należy używać produktu. Niniejszy wybór medyczny należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.

Skladování

Neskladujte při teplotě nad 25 °C.

Výrobce a dodavatel

KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Německo
Tel: +49 6105 - 203720
service@medintim.de
www.medintim.de

Produkcja i dystrybucja

KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Niemcy
Tel: +49 6105 - 203720
service@medintim.de
www.medintim.de

CE

wyrób medyczny

SYLK

Kivi bitkisinin sıvusundan elde edilen doğal kayganlaştırıcı jel, onlarca yıldır tamamen bitkisel ve bu sayede oldukça iyi tolore edilebilen bir kayganlaştırıcı olarak kendini kanıtlamıştır. Sylk® hayvansal bileşenler, hormon, silikon ve paraben içermez.

Kullanım kılavuzu

Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.

Bileşim

Saf su, sodyum sitrat, sitrik asit, potasyum sorbat, greyfurt çekirdeği ekstresi, glicerin, kivi meyvesi ekstresi, ksantan gum

Endikasyonlar

Sylk® cinsel ilişili esnasında kayganlığın iyileştirilmesini ve zevk hissini mümkün olduğunda artırmasını sağlar. Bu sayede fissür oluşumu önlenir ve enfeksiyonlar azalır. Ürün, prezervatiflerin üzerinde ve tamponları, termometrelerin cinsel ilişkiye uygun şekilde kullanılmıştır. Uyarılar aracılık yerleştirilmesinde kullanım için de uygun.

Kontrendikasyonlar

Üründe karşı bilinen bir hassasiyet. Vajinal enfeksiyon mevcut olduğu durumlarda ürün kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Kullanım

Bireysel olarak ihtiyaç duyulan miktar doğrudan cildin üzerine sürüür veya parmaklarla istenilen bölgeye getirilir. Sylk® 4,4 – 4,7 aralığındaki hafif asidik pH değeri sebebi ile çoksa sahibi olma istenilen bulunduğu durumlarda kullanılmamalıdır. Bu nedenle bu dönemde doğurulanlığın optimize edilmesi için Prefert® vajinal jelin kullanılmamasını önermektedir.

Bu ürün suda çözünebilir, kokusudur ve yağı içermek, bu sayede doğal kaçuk lateksen, poliüretan ve polizoprenin üretilmesi sırasında prezervatiflerle yumulur. Ürünün gebeliği önceliği etkisi yoktur. Sylk® vajinal uygulama için uygun.

Paket, tümüyle plastik malzemeden yapılmıştır. Bu nedenle bu tür malzemelerin kullanımı güvenli olmalıdır. Bu tür malzemelerin kullanımı, bu tür malzemelerin kullanımı güvenli olmalıdır.

Açıklıkta sonra üç ay içinde**تاثيرات الجانية**

جني الآن ليس هناك تقارير عن آية اثار جانبية.

التخزين

يجب استهلاك المحتوى خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بعد فتح الأنبوة.

التصنيع والتوزيع

شركه كيسيل المساهمة ذات الضمان المحدود
KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Almanya
Tel: +49 6105 - 203720
service@medintim.de
www.medintim.de

CE

tibbi ürün

CE

جهاز طبي

SYLK سيلك**SYLK سيلك**

هلام ملقط طبيعي من عصير نبات الكيوي، أثبتت نفسه على مدى عقود كمادة مرغبة بيئية، نفعية ومتواقة. سيلك خالي من المكونات الحيوانية والهرمونات والستيلكون وبارابينات.

تعليمات الاستخدام

يجب قراءة تعليمات الاستخدام قبل الاستعمال.

التركيب

ماء نقي، سترات الصوديوم، حمض السيتيك، سوربات البوتاسيوم، خلاصة زورق الجريب فروت، غليسرين، خلاصة الكيوي، صمغ الزنان.

الاستبيانات

يساعد سيلك على تحسين كفاءة الإنزال في حالات العصبية المعاصرة. عملية العناية والزينة ملحوظة ملحوظة، ومن النادر أن تحدث الشفقات، ومن النادر أن يظهر التهابات، وصلح أيضاً للاستخدام مع الراقي الذكري والسدادات الطبية وموازن مع الحرارة والماء المساعدة على التحفيز الجنسي.

موقع الاستعمال

فرط الحساسية المعروفة للمنتج في حالات العدو المهيأة استثنى طيبك قبل استخدام المنتج.

الاستخدام

يتم استخدام الكمية المطلوبة مباشرةً على الجلد أو جلتها إلى الموضع المطلوب بواسطة الإبرة. لا ينصح بـ سيلك أن يتم استخدامه على الأطفال وذلك لأن قيمة البيبروجينية الحمضية طيفاً وذات تراوحاً بين 4,4 و 4,7، بينما في هذه المرحلة توصي باستخدма الماء المائي (بريفيرت) لتحسين الحرارة.

هذا المنتج قابل للذوبان في الماء ويعيد الرائحة وخالي من الدهون وبالتالي فهو متافق مع الراقي الذكري، الولبي بوريثين ونولي ايسوسرين. ليس له تأثير مانع للحمل، يصلح سيلك للاستخدامات المهمة.

لا تستعمل المنتج في حال وجود أضرار في العين

العلبة إن كنت إلى الإضرار بـ سيلك، يُحظر المنتج الطبي بعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

التاثيرات الجانبية

حتى الآن ليس هناك تقارير عن آية اثار جانبية.

التخزين

يجب عدم حفظ هذا المنتج في درجة حرارة تتجاوز 25 درجة مئوية.

التصنيع والتوزيع

شركة كيسيل المساهمة ذات الضمان المحدود
KESSEL medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf, Almanya
Tel: +49 6105 - 203720
service@medintim.de
www.medintim.de

CE

جهاز طبي

CE

صالح للاستخدام حتى

	Vor Sonneninstrahlung schützen Protect from sunlight Protéger des rayons du soleil Tenere al riparo dalla luce solare Proteger de la radiación solar Beschermen tegen direct zonlicht Skal beskyttes mod sollys Beskyttes mot solstrålning Chraňte před slunečním zářením Chronić przed działaniem promieni słonecznych Güneş ışıklarından korunuz. يجب حفظه بعيداً عن أشعة الشمس
--	--

	Kennzeichnung Verpackungsmaterial Packaging material labeling Marquage matériel d'emballage Marcatura del materiale da imballaggio Etiquetado material de embalaje Etikettering van verpakkingsmateriaal Mærkning emballeringsmateriale Märkning förpackningsmaterial Merking pakningsmateriale Oznámení obalového materiálu Oznakowanie materiału opakowaniowego Ambalaj materyali işaretleri
--	---

	Herstellungsdatum Manufacturing date Date de fabrication Data di fabbricazione Productiedatum Produktionsdato Tillverkningsdatum Fecha de fabricación Data produkcji Datum výroby Üretim tarihi
--	---

	Chargebezeichnung/-nummer Batch number Désignation/Nºmero de lot Codice/numero di lotto Partijnaamduiting/-nummer Batchbetegnelse/-nummer Batchbetegnelse/-nummer Satznummer Denominación Oznacenie/numer serii Oznámení/císlo šárže Parti işaretü/numarası
--	--